

# Certificado de calibración

NO. P01130225-01

## INFORMACION DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

MAGNITUD	PRESION
EQUIPO	ESFIGMOMANOMETRO
MARCA	N.R
MODELO	PARED
SERIE	0535-01
ACTIVO FIJO	N.R
UNIDAD DE MEDIDA	mmHg
RESOLUCION	2mmHg
RANGO DE MEDICION	40 - 280

## INFORMACION CLIENTE

SOLICITANTE	ESE Hospital San José de La Palma
DIRECCION SOLICITANTE	Cra. 5 #1-04
UBICACION	CONSULTORIO 3
FECHA DE CALIBRACION	13 de febrero de 2025
NUMERO DE PAGINAS	5

## FIRMAS AUTORIZADAS

Ingeniera Alejandra Vargas

Calibro

Katherine Mosquera

Revisor

SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE REPORTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE MEDICSION S.A.S ASÍ COMO DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO. LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EXPRESADOS EN ESTE REPORTE SE REFIEREN ÚNICAMENTE AL EQUIPO SOMETIDO A CALIBRACIÓN Y DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA UTILIZACIÓN DE DICHO EQUIPO. EL REPORTE NO ES VÁLIDO SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE MEDICSION S.A.S.

# REPORTE DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO NO. P01130225-01

## TRAZABILIDAD INSTRUMENTO EQUIPO PATRÓN

Medición S.A.S garantiza la trazabilidad de sus equipos patrón utilizados para establecer la trazabilidad al sistema internacional de unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones en laboratorios competentes, conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:201750-200

EQUIPO	SIMULADOR DE SIGNOS VITALES	RANGO	0 – 400 mmHg
MARCA	FLUKE BIOMEDICAL	RESOLUCIÓN	0,1 mmHg
MODELO	PROSIM 8	FECHA CALIBRACIÓN	2023 / 07 / 11
SERIE	2897041	PRÓXIMA CALIBRACIÓN	2025 / 07 / 11
NO. CERTIFICADO	CG 2607-23	CALIBRADO POR	Set y Gad S.A.S.

## INFORMACIÓN RELEVANTE

La información acerca del sitio de medición, así como las fechas en que se recibe y se calibra el equipo se plasma a continuación, así como las condiciones con las que contaba el ambiente al momento de la calibración.

FECHA RECEPCIÓN	13 de febrero de 2025
FECHA CALIBRACIÓN	13 de febrero de 2025
SITIO DE CALIBRACIÓN	ESE Hospital San José de La Palma
METROLOGO	Ingeniera Alejandra Vargas

Calle 12A 14 -38, Piso 2, Barrio Urazandi

Tunja, Boyacá

medicsionsas@gmail.com

3146007511

## CONDICIONES AMBIENTALES DEL SITIO

CONDICIÓN	MIN	MAX
TEMPERATURA (C°)	22.7	23.3
PRESION BAROMETICA (hPa)	1016	
HUMEDAD RELATIVA %hr	0.64	0.8

## INCERTIDUMBRE COMBINADA

El cálculo de la incertidumbre expandida se obtiene por el producto del factor (k) de 2 para un nivel de confianza del 95%, por el resultado de la incertidumbre combinada que es la sumatoria de las incertidumbres asociadas a la medición y al método siendo su cálculo la raíz cuadrada del cuadrado de la incertidumbre tipo A que es la relacionada con el método más las incertidumbres tipo B que son asociadas al equipo, al patrón y al ambiente que en este caso es calculada con la temperatura.

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA	2.40
INCERTIDUMBRE COMBINADA	1.20

$$\mu_{Combinada} = \sqrt{\mu_A^2 + \mu_{Equipo}^2 + \mu_{Patrón}^2 + \mu_{T°}^2}$$

---


$$U = 2 * \mu_{Combinada}$$


---

## MEDICIONES OBTENIDAS

Se realizan las mediciones en comparación directa con el tensiómetro con el fin de observar la diferencia que entrega con respecto al patrón es decir el error que tiene el equipo, después de realizar el proceso se obtuvieron los siguientes resultados

mmHg	40	60	80	100	120	140	160	180	200	240	280
PRIMERA	39.60	59.50	78.00	98.00	118.00	137.60	156.80	176.00	195.00	235.00	274.00
SEGUNDA	39.20	58.90	78.20	98.20	118.00	135.60	156.00	175.00	196.00	230.00	271.00
ERROR	-0.60	-0.80	-1.90	-1.90	-2.00	-3.40	-3.60	-4.50	-4.50	-7.50	-7.50

Calle 12A 14 -36, Piso 2, Barrio Urazandi

Tunja, Boyacá


medicsionsas@gmail.com

3146007511


Se halló el promedio del grupo de errores obtenidos en el grupo de datos y la desviación estándar que había entre los mismos y este fue el resultado:

ERROR PROMEDIO	-1.77
DESVIACION ESTANDAR	1.01

Al graficar los errores obtenidos respecto al patrón el cual era la presión emitida por el equipo de tensiómetro, se obtuvo el siguiente resultado:

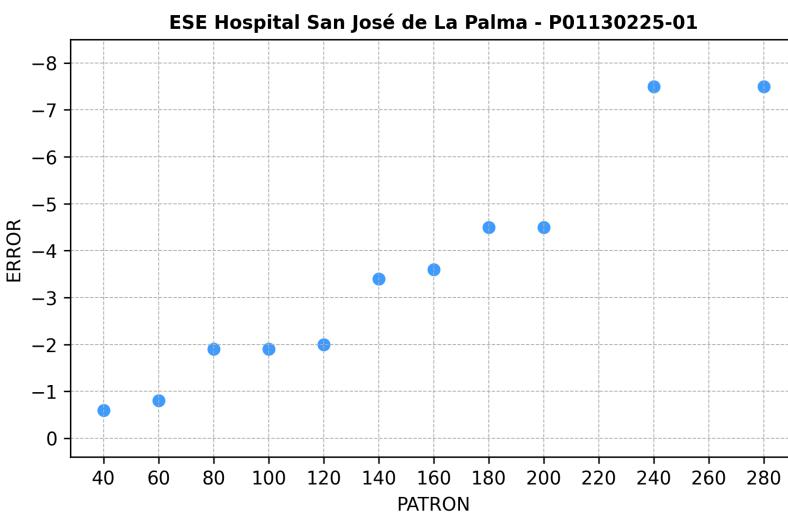

Posteriormente se realiza un estudio a los datos y se realiza el grafico de la desviación estándar que presentó el conjunto de datos de los errores del tensiómetro, dando como resultado el siguiente gráfico:

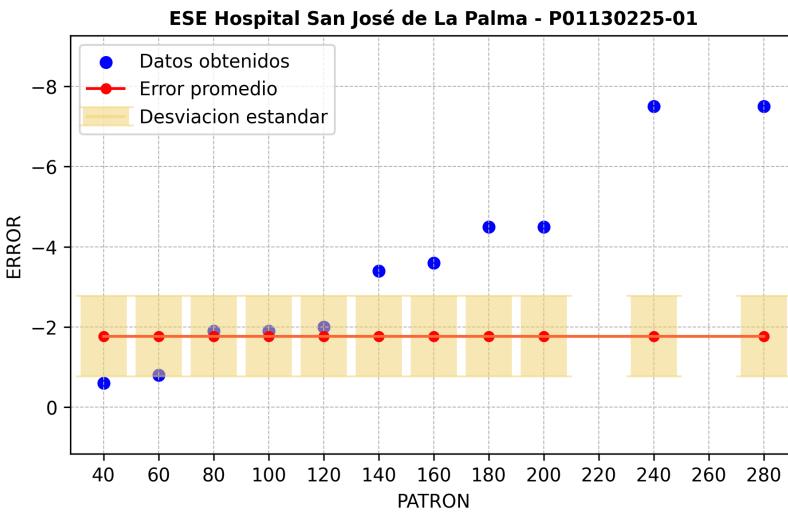

La gráfica muestra el análisis de los errores en el tensiómetro comparando los valores de referencia con las desviaciones observadas. Las barras rosadas reflejan la dispersión de los errores para cada patrón, mientras que los puntos rojos indican el promedio del error en cada caso. Los diamantes azules representan valores individuales fuera del promedio, ayudando a identificar posibles anomalías en la medición. Esta visualización permite evaluar la precisión y consistencia del tensiómetro en diferentes rangos de medición.

## RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar calibraciones periódicas para garantizar que el tensiómetro mantenga su precisión y exactitud a lo largo del tiempo

## OBSERVACIONES

No se realizan observaciones

